

Informacje techniczne

Akcesoria bezprzewodowe

ConnectClip bezprzewodowo łączy aparaty słuchowe Oticon z komunikacją bezprzewodową i techniką 2,4 GHz przez Bluetooth z większością telefonów komórkowych.

ConnectClip służy również jako zdalny mikrofon pozwalający lepiej słyszeć wybranego rozmówcę w trudnych sytuacjach akustycznych.

Zestaw słuchawkowy do telefonów komórkowych

ConnectClip można sparować z większością telefonów komórkowych za pośrednictwem Bluetooth, w efekcie zmieniając aparaty słuchowe w wysokiej jakości zestaw słuchawkowy. Dźwięk z telefonu jest przesyłany bezprzewodowo do aparatów słuchowych, a mikrofony kierunkowe w ConnectClip odbierają głos noszącej go osoby.

Słuchawki do muzyki (A2DP)

Dźwięk/muzyka z połączonego przez Bluetooth telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 itp. jest przesyłany w jakości stereo do obu aparatów słuchowych.

Zdalny mikrofon


ConnectClip działa w specjalnym trybie jako zdalny mikrofon ułatwiający rozumienie noszącego go rozmówcy - na odległość (do 20 metrów) i/lub w bardzo głośnym otoczeniu.

PC/laptop/komputer

Jeżeli parowanie/łączenie bezpośrednio z wbudowanym w komputerze Bluetooth sprawia problem, można użyć ConnectClip z adapterem BT D800 USB.

Więcej informacji można znaleźć na: www.oticon.pl

ConnectClip

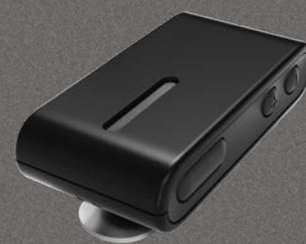

ConnectClip to wielofunkcyjne urządzenie ułatwiające użytkownikom aparatów słuchowych Oticon uczestniczenie w wielu codziennych sytuacjach i wykonywanie codziennych czynności - trudnych lub wręcz niemożliwych, nawet jeśli ma się najlepsze aparaty słuchowe.



W zestawie

- instrukcja obsługi
- zwykła i długa smycz
- ładowarka
- przewód zasilający USB
- etui ochronne
- osłonka




Dane techniczne

Nazwa/model	ConnectClip/AC1A
FCC/IC	FCC ID: ZACAHAC01 IC: 11936A-AC01
Kompatybilność	Aparaty słuchowe Oticon wykorzystujące technikę łączności radiowej 2,4 GHz
Wymiary	53 x 27 x 18 mm; masa 27 g
Warunki użytkowania	Warunki transportu i przechowywania: W trakcie transportu i przechowywania temperatura oraz wilgotność nie powinny przez dłuższy czas przekraczać poniższych limitów: <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: od -20°C do +60°C• Wilgotność: od 15% do 93%, bez skraplania Warunki w środowisku pracy: <ul style="list-style-type: none">• Temperatura: od +5°C do 40°C• Wilgotność: od 15% do 93%, bez skraplania• Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa
Funkcje systemu	Zestaw słuchawkowy telefonu komórkowego (profil handsfree/headset) oraz Stereo Music (A2DP) Zdalny mikrofon
Zdalne sterowanie funkcjami aparatu słuchowego	Zmiana głośności, programu, wyciszenie mikrofonów aparatów słuchowych
Akumulator ¹	Typowe dzienne użytkowanie 16 godz.: 2 godz. przesyłania strumieniowego audio + 2 godz. korzystania z telefonu + 12 godz. czuwania 36 godz. czuwania (włączony, bez przesyłania strumieniowego) Czas ładowania: 2 godz. Całkowity przewidywany czas życia akumulatora: 80% pojemności po 720 cyklach ładowania/rozładowania
Jakość sygnału audio ²	Stereo/częstotliwość próbkowania 20 kHz
Pasma przenoszenia ²	80 Hz - 10 kHz
Szczegóły dot. parowania	Do 8 sparowanych urządzeń Bluetooth
Zgodność z Bluetooth	Wersja 4.2 + EDR
Obsługiwane tryby Bluetooth	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.3 Headset Profile (HSP) 1.2 Hands-Free Profile (HFP) 1.6 w tym wsparcie dla Wideband Speech
Zasięg bezprzewodowy ³	10 metrów z urządzeniami Bluetooth klasa 2 (np. telefonami komórkowymi) do 20 metrów między ConnectClip a aparatami słuchowymi
Częstotliwość przesyłania	2,4 GHz (pasmo Bluetooth)
Emisje	Maks. 17 dBm e.i.r.p. zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami
Wskaźniki stanu	LED na ConnectClip. Sygnały akustyczne w aparatach słuchowych
Genie 2017.2 (lub nowsze)	Aktualizacja firmware. Dopasowanie programów streamingowych

1. Przy korzystaniu z dołączonej ładowarki.

2. Rzeczywista wydajność dźwięku zależna od aparatów słuchowych użytkownika.

3. Przy zasięgu optycznym między ConnectClip i innymi urządzeniami. Inne urządzenia pracujące w paśmie 2,4 GHz mogą powodować zakłócenia i ograniczać zasięg.

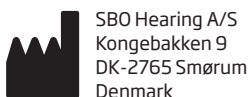

Utylizacja sprzętu elektronicznego musi być zgodna z lokalnymi przepisami.

